

Accent *Prime*

Love Your Shape

SIGNIFIKANT KÜRZERE
BEHANDLUNGSZEITEN

KOMBINIERTE TECHNOLOGIEN FÜR
BESSERE, LANGANHALTENDE ERGEBNISSE

EINFACH ZU BEDIENEN,
PLUG & PLAY TECHNOLOGIE

KEINE TEUREN VERBRAUCHSARTIKEL

SCHMERZFREIES,
ANGENEHMES VERFAHREN

KLINISCH BEWÄHRT IN
ZAHLRICHEN STUDIEN





MACHEN SIE DAS BESTE AUS IHREN KUNDEN

Almas Accent Prime™ ist das modernste System zur Hautverjüngung sowie zur Formung und Straffung von Gesicht und Körper. Die Plattform vereint die neuesten Entwicklungen aus der Ultraschall- und der Radiofrequenz-Technologie und bietet so wirksame, individuell anpassbare Behandlungen mit natürlich aussehenden, langanhaltenden Ergebnissen.

Auf Basis zehnjähriger Erfahrung und großem klinischem Erfolg im Bereich der Körperformung bietet Alma nun mit Accent Prime die neueste Generation der erfolgreichen Accent-Familie, die gezielt die Fettzellen anspricht und zugleich das Kollagen im Gewebe strafft und durch die Synergie aus verschiedenen Technologien optimale Ergebnisse erzielt.

Dank einer breiten Auswahl an Applikatoren und Behandlungsmethoden können Sie Ihren Patienten individuell zugeschnittene Lösungen je nach Hauttyp und Indikation anbieten. Technologische Innovationen bieten zugleich neues Potential, wie Behandlungen zur Körperformung, dem Body Contouring, in beispielloser Geschwindigkeit - für kürzere Behandlungszeiten und noch bessere Ergebnisse.

Accent Prime ist ein System von Alma Lasers, einer weltweit anerkannten Marke für medizinisch ästhetische Technologien. Alma ist führend auf diesem Gebiet mit nachgewiesenem klinischem Erfolg und großer Sicherheit sowie FDA-Zulassung für die Accent Familie zur Körperformung seit 2007. Mit Accent Prime sind Sie stets in guten Händen - mit Ihren Patienten und Ihrer Praxis!

"Accent Prime, das jüngste Mitglied der Accent Produktfamilie, bietet das neue UltraSpeed Handstück mit einer speziellen Ultraschall-Technologie mit geführten Schallwellen. Diese Innovation reduziert die Behandlungszeit auf die Hälfte."

Dr. Ziv Karni, CEO & Gründer, Alma Lasers

Neueste Entwicklung

UltraSpeed




Das UltraSpeed Handstück kombiniert eine neue Art von nicht-fokussiertem Ultraschall mit einer besonders großen Applikator-Platte zur extrem schnellen Körperformung - auch Body Contouring genannt. Diese Technologie mit Kavitation und Scherwellen ist exklusiv nur auf Almas Plattform Accent Prime erhältlich. Die plattenförmige Sonotrode des UltraSpeed gibt in konzentrischer Form geführte Ultraschallwellen ab, um das Zielgewebe zu erwärmen. Die Ultraschall-Energie wird homogen auf die gesamte, 300 cm² große Behandlungsfläche abgegeben und bekämpft dort gezielt hartnäckige Fettzellen. Die Behandlung des kompletten Abdomen dauert mit UltraSpeed nur noch rund 20 Minuten, was den Komfort für den Anwender erheblich steigert.




UltraSpeed Handstück

"Das neue UltraSpeed-Handstück liefert durch seine hohe Abdeckungsrate optimale Ergebnisse. Histologien belegen eindeutig die Schädigung der Fettzellen in der Hypodermis."

Dr. Joseph Lepselter, Vice President Clinical Affairs, Alma Lasers

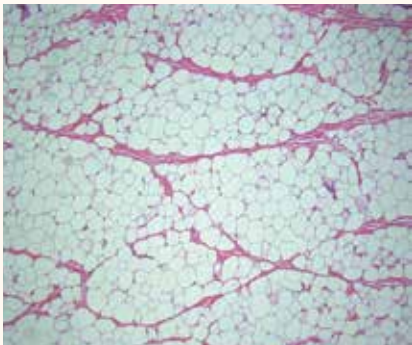

Normale Fettzellen in der Hypodermis

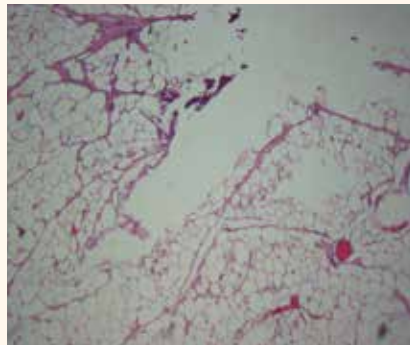

Abnormal - geschädigte Fettzellen

"Die Ergebnisse des Accent Prime sind verblüffend. Bereits nach einer Behandlung mit dem UltraSpeed-Handstück bemerken wir einen deutlichen Umfangsverlust im Bereich des Bauches. Unsere Patienten empfinden die Behandlung als sehr angenehm und schmerzfrei, sie ähnelt einer wärmenden Massage. Auch bei der Hautstraffung sowie bei Kombinationsbehandlungen mit Fadenlifting, Unterspritzung oder nach einer Fettabsaugung erzielen wir gute Erfolge. Der Accent Prime verzichtet zudem auf teure Verbrauchsartikel und ist durch die kurze Behandlungsdauer und das ergonomische Handstück sehr anwenderfreundlich."

Dr. Sophia Bethge, Metropolitan Aesthetics, Berlin




KOMBINIERTE TECHNOLOGIEN FÜR LANGANHALTENDE ERGEBNISSE

Effektiv *Dielektrische Erwärmung*

Accent Prime nutzt die dielektrische Erwärmung - einen einzigartigen Mechanismus, mit dem Radiofrequenzenergie von 40,68 MHz (40,68 Millionen Schwingungen pro Sekunde) direkt in das Gewebe übertragen wird. Sie verursacht im Gewebe eine schnelle Oszillation der Wassermoleküle, die daraus resultierende Reibung erzeugt hochwirksame Wärme genau in der gewünschten Zielstruktur.

Da die Haut vor allem aus Wasser besteht, verursacht diese Erwärmung volumetrische Kontraktionen in der Haut. Dies zieht bestehende Fasern zusammen, stimuliert die Bildung von neuem Kollagen und verbessert seine Dicke und Ausrichtung. Die tiefe, gleichmäßige Erhitzung mit Accent Prime erzielt überzeugende, einheitliche Resultate.

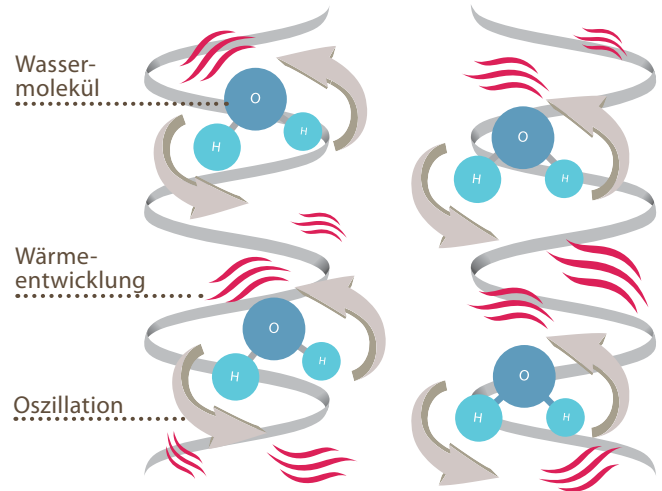

Leistungsstark *Impedanz-Anpassung*

Mit einer hohen Leistung von bis zu 300 Watt und minimalem Energieverlust durch Anpassung an die Impedanz (Wellenwiderstand) der Haut, bietet Accent Prime die maximale Leistung für jede Behandlung. Denn wenn RF Energie an das Gewebe abgegeben wird, führt der Wellenwiderstand des Körpers dazu, dass ein Teil der Leistung an der Haut zurück zur Energiequelle reflektiert und damit unwirksam wird. Mit der Impedanzanpassung und der höchsten Spitzenleistung auf dem Markt überwindet Accent Prime diese Impedanz des Körpers, reduziert die Reflexion und bringt so die maximale Energie in das Zielgewebe ein.

Tief *UniPolar™*


Almas patentierte¹ Unipolar-Technologie erlaubt die fokussierte, sichere und tiefe Erwärmung des Gewebes in variablen Tiefen der Haut.

Unipolar arbeitet mit einer einzelnen Elektrode, die konzentrierte RF Energie in tiefere Gewebeschichten einbringt - ohne unangenehme Begleiterscheinungen für die Patienten.

Gezielt *Tiefenkontrolle*

Durch Accent Primes Technologie zur Tiefenkontrolle lässt sich die Eindringtiefe der Energie und damit die Behandlungstiefe flexibel und präzise auf die relevanten Gewebeschichten anpassen, was die Ergebnisse der Behandlung optimiert.

Diese Auswahl von tiefen und oberflächlichen Ansätzen bietet für jeden Patienten und jedes Areal, je nach Hauttyp und Dicke der Haut sowie je nach Indikation individuell die ideale Behandlung. Oder wählen Sie eine Kombination beider Ansätze auf dem selben Areal, um die Ergebnisse der Behandlung noch weiter zu verbessern.

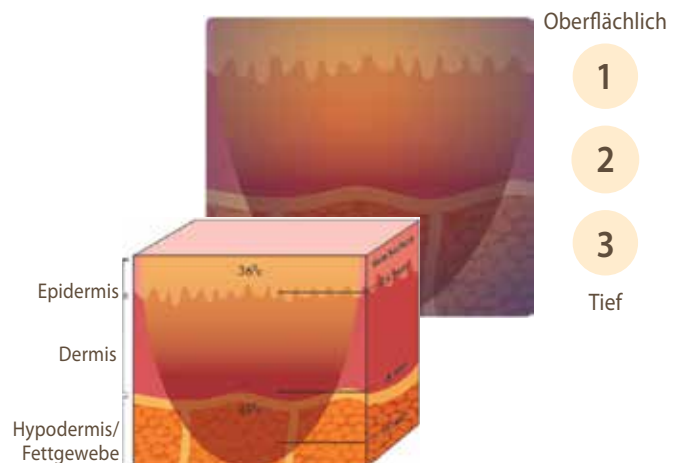

Zielt auf die Fettzellen ab

Kalter & Heißer Ultraschall

Accent Prime bietet die patentierte² Cold Shear Wave Technologie mit kaltem Ultraschall zur selektiven Behandlung der Fettzellen ohne Schädigung des umliegenden Gewebes. Die Membran der Fettzellen wird zerrissen und die allmähliche Freisetzung von gespeichertem Fett ausgelöst. Die zerstörten Fettzellen werden dann vom Körper über das Lymphsystem abgebaut. Accent Prime bietet zudem heißen Ultraschall, welcher mit Druckwellen ein hohes Maß an Kavitation erzeugt und lokale Fett-Depots somit thermisch aufbrechen kann. Anwender können mit ein und demselben Handstück mit kaltem (shear) oder warmem (hot) Ultraschall arbeiten – oder mit einer Kombination aus beidem für noch bessere Ergebnisse.

Fraktioniert *Microplasma™*

Mit seiner einzigartigen Mikroplasma-Technologie bietet das Accent Pixel RF™ Handstück eine Behandlung zur Hautverjüngung durch fraktionierte Ablation und Erwärmung des Gewebes. Dieser sanfte, fraktionierte Ansatz reduziert das Risiko von Nebenwirkungen wie der postentzündlichen Hyperpigmentierung (PIH). Die durch die Pixel RF-Technologie erzeugten Mikroverletzungen regen Selbstheilungsprozesse im Gewebe an und stimulieren mit der eingebrachten Wärme die Neubildung von Kollagen. Die umliegende Haut bleibt unberührt, was den natürlichen Heilungsprozess beschleunigt.

IMPACT™ (Transepidermale Durchdringung)

Das patentierte³ IMPACT™ Handstück nutzt Ultraschall-Energie, um aktive Substanzen über die epidermal-dermale Hautbarriere hinaus tief in das Gewebe einzubringen. Zunächst erzeugt hier das Mikroplasma (Pixel RF) Handstück Mikro-Kanäle in der Haut. IMPACT bringt dann durch intermittierenden positiven und negativen Schalldruck aufgetragene topische Wirkstoffe durch diese Mikro-Kanäle und gegen den Druck der dort angestauten intrazellulären Flüssigkeit in die Haut ein. Die oszillierende akustische Vibration erzeugt einen Push-Pull-Effekt in den Kanälen, welcher die gestaute Flüssigkeit sowie die aktiven Substanzen tief in das Gewebe eindringen lässt.

IHRE VORTEILE



SELEKTIV

Fokussierte, kontrollierte Behandlung in variabler Tiefe für optimale Ergebnisse ohne Schädigung des umliegenden Gewebes.



SICHER

Behandlungen mit Accent Prime sind sicher und wirksam bei allen Hauttypen (I-VI) und für alle Bereiche des Körpers, einschließlich empfindlicher Areale im Gesicht, am Hals und im Dekolleté.



KOMBINIERTE TECHNOLOGIEN

Kombinieren Sie die Technologien und Behandlungsmöglichkeiten für schnellere und länger anhaltende Ergebnisse in weniger Sitzungen.



KOMFORTABEL

Eine schrittweise Erwärmung und die integrierte Kühlung erhöhen spürbar den Patientenkomfort.



KEINE AUSFALLZEIT

Die Patienten können sofort wieder ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen.

INDIKATIONEN

Formung von Gesicht und Körper

Accent Prime bietet eine wirksame Lösung gegen Fetteinlagerungen und erschlaffte Haut und verbessert sichtbar die Kontur von Gesicht und Körper. Die Synergie aus RF- und Ultraschall-Technologien liefert hierbei wesentlich bessere Ergebnisse, als jede Technologie für sich. Kalte Ultraschall-Wellen zerstören selektiv Fettzellen, unipolare RF-Energie beschleunigt den Stoffwechsel für eine schnellere Lymphdrainage. Die anschließende Applikation von warmer RF-Energie kontrahiert das Gewebe, strafft die Haut und verbessert ihre Textur durch den Aufbau von neuem Kollagen.

Handstücke




UltraSpeed - bietet eine neue Art von Ultraschall-Technologie mit geführten Ultraschall-Wellen sowie einen extra großen Ultraschallkopf zur besonders schnellen Behandlung von großen Arealen am Körper.



UltraFace - vereint kalten Ultraschall (shear waves) und eine Ultraschall-Technologie mit Druckwellen zur Formung des Gesichts. Der Ultraschallkopf bringt die Energie tief in das Gewebe ein. Ideal für kleinere Areale, beispielsweise im Gesicht.

Weitere Handstücke zur Formung von Gesicht und Körper auf Anfrage.

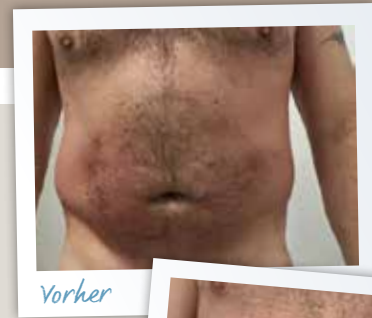

Vorher



Nachher

Mit freundlicher Genehmigung von Viola Aladag, Berlin

"Die Formung des Gesichts ist eine Schlüssel-Behandlung auf dem Anti-Aging-Gebiet. Durch die Kombination aus einzigartigem kaltem Ultraschall und Radiofrequenz liefert Almas Accent exzellente Ergebnisse bei Fettdepots und erschlaffter Haut in nur einer Behandlung - und gibt den Patienten ein jünger aussehendes Gesicht zurück."

Dr. Maria Claudia Almeida Issa, Brasilien

Hauterneuerung und Hautverjüngung

Ein ungleichmäßiger Teint, oberflächliche Pigmentveränderungen, Dehnungsstreifen und raue, unebene Haut lassen sich mit der Mikroplasma-Technologie des Accent Prime wirksam behandeln. Die Kombination mit IMPACT optimiert die Ergebnisse dieser Haut-Reparatur.

Handstücke




Microplasma - Pixel RF dient der fraktionierten Ablation durch Mikro-Plasmafunken sowie der Erwärmung des Gewebes. Diese Mikroverletzungen regen Selbstheilungsprozesse im Gewebe an und die Neubildung von Kollagen wird stimuliert. Die umliegende Haut bleibt unberührt, was den natürlichen Heilungsprozess beschleunigt.


Es stehen verschiedene Microplasma-Handstücke und Aufsätze zur Verfügung.



Microplasma + IMPACT - die Kombination aus fraktionierter Behandlung und IMPACT-Technologie sorgt für noch bessere Ergebnisse durch das wirksame Einschleusen von Wirkstoffen in tiefere Hautschichten.

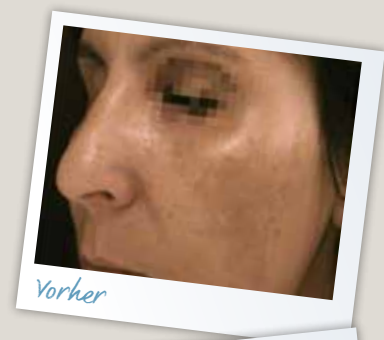

Vorher

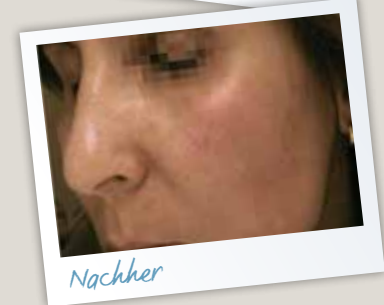

Nachher

Mit freundlicher Genehmigung von Lehaviv Akerman, MD
Head of Dermatology Department, Rothchild Medical Center, Israel

Hautstraffung

Altersbedingte Unebenheiten der Haut wie Falten und feine Linien sowie nachlassende Spannkraft sind oft eine echte Herausforderung – nicht aber für Accent Prime. Die Behandlung wirkt effektiv bei bestehenden Fältchen und erschlaffter Haut und wappnet die Haut zugleich besser gegen künftige Alterungsprozesse.

Handstücke



CoaxiPolar - zur lokalen, oberflächlichen Erwärmung an sensiblen Arealen, beispielsweise im Gesicht. Mit Temperatur-Messung in Echtzeit.



UniLarge - UniPolar RF-Handstück zur Straffung der Kollagen-Fasern in der Tiefe und Stimulation der Kollagen-Neosynthese. Auch für größere Areale am Körper geeignet.



Periorbital - strafft erschlaffte Haut speziell im Bereich um die Augen.

Weitere Handstücke zur Hautstraffung auf Anfrage.



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sophia Bethge, Metropolitan Aesthetics, Berlin

"Almas Technologie zur Impedanz-Anpassung an die Haut ermöglicht das Einbringen der maximalen RF-Energie in das Zielgewebe. In Kombination mit der einzigartigen Tiefen-kontrolle kann die Energie im subdermalen Gewebe fokussiert werden, was die Epidermis schützt. Diese Methode ist sicher und einfach anzuwenden."

KeeLee Tan, MD.
Rejuvenate Clinic, Perth, Australien

Cellulite

Vergößerte Fettdepots unter der Hautoberfläche verursachen das unebene Hautbild der Cellulite. Durch die Kombination aus RF-Energie und mechanischer Massage kann Almas Accent Prime den Stoffwechsel in diesem Gewebe stimulieren, das Volumen der Fettzellen reduzieren, die Lymphdrainage anregen und so die Textur der Haut sichtbar glätten.

Handstück



UniBody - kombiniert die hochenergetische UniPolar RF-Technologie mit einem abnehmbaren rotierenden Massagering. Die Behandlung erwärmt die Hautschichten, regt die Blutzirkulation im Unterhautgewebe an und verbessert das Erscheinungsbild von Cellulite.



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. JD McCoy, Contour Medical, Gilbert / Arizona, USA

Alma Accent Prime

Love Your Shape

Alma Lasers ist ein führender Anbieter von Laser-, Licht-, Radiofrequenz- und Ultraschall-Technologien für die Ästhetik, Dermatologie, Kosmetik und Chirurgie.

Unsere Anwender bieten sichere und wirksame Behandlungen an, und ihre Patienten profitieren von hochmodernen, klinisch bewährten Lösungen.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg, Deutschland
Tel. + 49-911 / 89-11-29-0
Fax + 49-911 / 89-11-29-99

info@alma-lasers.de
www.alma-lasers.de

© 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Accent, Alma, das Alma Firmenzeichen, Alma Lasers, Accent Prime, Impact, Microplasma, Pixel, Unipolar und Ultra sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Alma Lasers Ltd. in den USA und/oder anderen Ländern.

www.almaaccent.de

PBAC17021601

Folgen Sie
Alma Lasers



¹Alma Accent Unipolar RF ist geschützt durch US-Patente Nr. 7630774, 8150532 und Europäisches Patent Nr. 1715810. Weitere Patente und ausstehende Patente in den USA und/oder anderen Ländern. ²Alma Accent Ultra Produkte sind geschützt durch US-Patent Nr. 8579835 und Europäisches Patent Nr. 2252369. Weitere Patente ausstehend in den USA und/oder anderen Ländern.

³Alma Accent Impact Produkte sind geschützt durch Europäisches Patent Nr. 2459268; Weitere Patente und ausstehende Patente in den USA und/oder anderen Ländern.